

デジタルイメージングスキャナ

SCAN▶X® Duo Touch

再使用可能なイメージングプレート(光輝尽性蛍光板)を用いて、デンタルエックス線画像を生成するイメージングスキャナです。



デジタルエックス線撮影専用 イメージングプレートスキャナ

感染防止対策のための専用バリアエンベロップ

- 交叉感染を抑えるように工夫、設計されています
- スキャン時、引き裂く方向が工夫されており感染を抑えます

高精細画像

- 最大理論解像度40lp/mmの高精細画像
※Super選択時

2枚同時処理

- 2つの挿入口で複数枚撮影時もスピーディーにスキャンできます

スタンドアローンモード

- スキャナ本体のみでスキャンして、本体の7inchタッチスクリーンにて画像の確認が可能です
- PC不具合からの復旧時も本体から容易に画像転送が行えます

専用イメージングプレート

- 数百回の再使用が可能です
- 非常に薄く口腔内で適切な位置付けが可能です
- #0~4に対応

NEOPREMIUM2と接続して使用

- スムーズな診療システムを構築できます
- 患者さんと良好なインフォームドコンセントが行えます
- 静かで早いスキャンにより効率的なワークフローが実現できます
- 10枚法、14枚法の登録が簡単に行えます




SCAN▶X® Duo Touch

仕様

一般的名称	コンピューテッドラジオグラフィ
販売名	スキャンX デュオタッチ
外形寸法 (幅:奥行:高さ)	234×293×379 mm
質量	8kg
定格電源電圧	電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 電源アダプタ出力 DC24V 1.65A
インターフェイス	LAN
レーザー	本体カバー装着時 クラスI 本体カバー開口時 クラスIIIb
スキャン時間	Size0: Super 26sec/ VeryHigh 16sec/ High 13sec / Standard 6sec Size2: Super 32sec/ VeryHigh 20sec/ High 16sec / Standard 8sec
解像度	理論値:40 lp/mm 実測値:23 lp/mm(VeryHigh選択時)
医療機器認証番号	305ACBZX00028000
医療機器の分類	管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器



イメージング・プレート

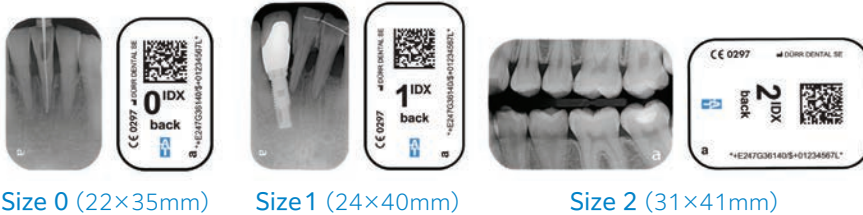

Size 0 (22×35mm)

Size 1 (24×40mm)

Size 2 (31×41mm)

標準付属品

- イメージングプレート Size0(小児22×35mm)2枚
Size2(標準31×41mm)6枚
- プレートガイド Size0,1,3用各1個
Size2用2個
Size4用1個
- バリアエンベロープ Size0用100枚
Size2用300枚



Size 3 (27×54mm)

Size 4 (57×76mm)



製造販売元: 朝日レントゲン工業株式会社
製造元: デュールデンタル社(ドイツ)

スキャン X デュオタッチ専用イメージングプレート

一般的名称	光輝性蛍光板
販売名	デンタル・イメージング・プレート IDX
製造販売届出番号	26B1X10010024501
医療機器の分類	一般医療機器

Imaging new visions. ▼ 見えるをかえる。▼

朝日レントゲン工業株式会社 <http://www.asahi-xray.co.jp>

〒601-8203 京都府京都市南区久世築山町376番地の3 TEL:075-921-4330 FAX:075-921-6675

※札幌・仙台・東京・名古屋・京都・大阪・高松・広島・福岡にショールームを開設しております。
日本国内の各拠点の詳細につきましてはWEBサイトに掲載しております。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※記載されている会社名、製品名またはサービス名は各社の商標または登録商標です。



朝日レントゲンメールマガジン QRコードから、
最新の製品情報・展示会情報・セミナー情報等をお送りします。ご登録ください。

