



スキャンオーダー、患者連動

スキャンデータ、画像連動

AOS3



AOS3

A-Oral Scan3 Wireless
Intra Oral Scanner

NEW Wireless mode

NEOPREMIUM2から、口腔内スキャンのオーダーをすると、すぐに口腔内スキャンが開始できます。
スキャン後は、スキャンデータ(OBJ,STL形式)をNEOPREMIUM2でも自動的に保存することができます。

スキャナ仕様

スキャナ本体

サイズ	： 50×270×40mm (W×D×H)
重さ	： 330±20g ※バッテリー、スキャンチップ含む
スキャン範囲	： [standard]16×12×22mm [mini]12×9×22mm
深度	： -2～20mm
出力ファイル	： STL、PLY、OBJ
インターフェース	： USB3.0
電圧	： 12V DC/3 A
スキャン原理	： Structured Light Triangulation
有孔ワイヤレス距離	： 同室 ～5m
コネクション	： ワイヤレス／ワイヤード

推奨PC仕様

OS	： Windows 10 64Bit ～
CPU	： Intel Core i7-12700 ～
RAM-メモリ	： 32GB ～
HDD	： 1TB SSD ～
グラフィックカード	： NVIDIA RTX 4060 8GB以上 (RTX3050,4050除く)
I/Oポート	： USB3.0 Type-A × 2 ～
解像度	： 1920×1080 60Hz～

詳しくは、こちらから



販売名:Aoral スキャン3
管理医療機器 承認番号:30400BZ100006000
一般的名称:デジタル印象採得装置、歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
専任製造販売業者:株式会社ジオメディ

Imaging new visions. ▼ 見えるをかえる。▼

朝日レントゲン工業株式会社

<https://www.asahi-xray.co.jp>

〒601-8203 京都府京都市南区久世築山町376番地の3 TEL:075-921-4330 FAX:075-921-6675

※札幌・仙台・東京・名古屋・京都・大阪・高松・広島・福岡にショールームを開設しております。
日本国内の各拠点の詳細につきましてはWEBサイトに掲載しております。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



朝日レントゲンメールマガジン

最新の製品情報・展示会情報・セミナー情報等をお送りします。ご登録ください。



250131

B01-AOL3-Rev.1



with



neopremium2

保険適用 令和6年度 CAD/CAMインレー

光学印象
(CAD/CAMインレー)
1歯につき **100点**

CAD/CAMインレーの
ための
高洞形成加算
1歯につき **150点**

光学印象
歯科技工士連携加算
(対面の場合)
1歯につき **100点**

※同科に2歯以上でも加算は1歯として算定

ワイヤレスで快適なスキャンング



モーションコントロール

マウスやキーボードを操作せずに、次の手順に移行できます。患者様にも説明しやすく、安全なスキャンングを提供します。




オープンシステム

OBJ/PLY/STLファイルを利用可能なCAD/CAMシステムと連携が可能です。

ceramill exocad®

AIアシスト

唇側や頬側などの歯牙以外の不要なデータをAIで自動認識して削除します。

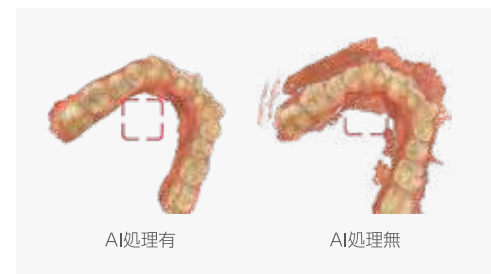

リアルな色調

実際の色調に近く、リアルタイムで確認でき、明確にマージンの確認が行えます。



ストレスフリーなワイヤレスモデル

有線の煩わしさのない自由な取り回しでスキャンを実現します。また、クレードルに戻すだけで充電可能です。

Wi-Fi6により高速かつ安定したデータ送信

通常のWi-Fiに比べて約1.4倍速い通信速度。通信範囲は同室内約5m。

長時間使用可能なバッテリー(3個付属)

1回のフル充電で約2時間の連続スキャンが可能。



クレードルで充電

スキャン終了後は本体をクレードルに置いて充電可能

有線接続可能

無線のみでなく有線でも使用可能

次世代のソフトウェア機能

オルソシュミレーション



治療全体のプロセスをシミュレーションし、治療後の効果をみる事ができるため、カウンセリングに効果的

口腔健康レポート



患者様の総合的な口腔健康状態を視覚的に示し、医師とのコミュニケーション効率を飛躍的に改善

モデル製作



修復モデルを簡単に設計し、プリントのための準備が可能

Shining 3D Dental Cloud

無料かつデータ制限無しで使用可能なデンタルクラウドです。歯科医院と技工所のやりとりをスムーズにし、模型レス化により保管スペースを省き、データを長期保管可能です。



安心の5年延長保証

保証料をいただくことでメーカー保証(1年)とほぼ同等の内容を一定期間延長するサービスです。延長保証サービスにご加入されると保証期間中に起きた自然故障に対して、無償修理を受けられます。

